


Рекомендуемая процедура* в один прием



Фотографии доктора Роско Лазо

1. Обследование с помощью рентгеновских лучей при необходимости. Если зуб может быть восстановлен (как при кавитированном поражении с обратимым пульпитом), можно рассмотреть процедуру ART.
2. Ополосните с помощью 1,5% перекиси водорода или ополаскивателем с повидоном-йодом.
3. Введите местную анестезию как показано.
4. Разместите раббердам для изоляции.
5. Если есть доступ к поражению, начните экскавацию кариеса с помощью хирургической кюретки или ложечки-экскаватора для удаления как можно большего поражения с клинической точки зрения. Разместите матрицу если уместно при подготовке реставрации.
6. Смешайте Biodentine™ и наполните объем полости с Biodentine™. Общее время обработки с Biodentine™ составляет 12 минут (6 минут для смешивания и размещения и 6 минут для застывания во рту).
7. После завершения затвердевания Biodentine™ полость может быть покрыта в один прием композитной пломбой в сочетании с самопротравливающимся дентинным адгезивом если это необходимо.
8. Удалите раббердам и проверьте окклюзию.
9. Пациент может быть освобожден с инструкциями по жеванию и уходу.
10. Договоритесь о проверке состояния по телефону.

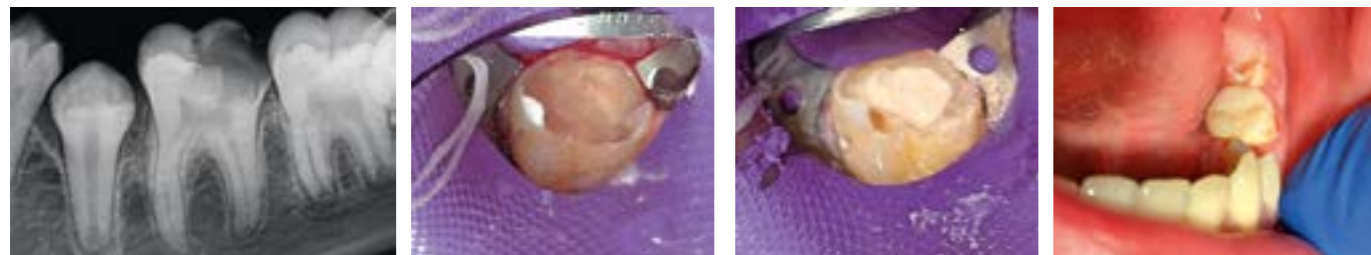

* Марк Рёттгер, доктор стоматологических наук, руководитель стоматологического отделения, Медицинский центр Университета Миннесоты

Septodont - 58 Rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - France

Tél. : +33 (0)1 49 76 70 00 - Fax : +33 (0)1 48 85 54 01

Пожалуйста, обратитесь к нашему вебсайту для дополнительной информации:

www.septodont.ru



Лечите глубокий кариес с минимальным воздействием аэрозоля



Атравматическое восстановительное лечение (ART)

Biodentine™

Минимизируя образование капель
и аэрозоля с техникой ART и Biodentine™



Что такое процедура ART?



Фотографии доктора Росио Лаэо

Преимущества процедуры ART

- Избегите образования аэрозоля
- Сохраните зуб
- Уменьшите вероятность возникновения одонтогенной инфекции
- Контролируйте боль

Почему выбрать Biodentine™ с процедурой ART?



Biodentine™ может быть размещен от пульпы по верха полости (биосовместимый балк-филл).

Для процедуры ART рекомендуется установить конечную реставрацию на эмаль в один прием.

83,3%*

Положительный уровень успеха

У Biodentine™ **положительный уровень успеха 83,3%*** во время процедуры покрытия пульпы с ручным удалением мягкого дентина и круглыми карбидными бурами на медленном наконечнике.

*Hedge et al: Clinical evaluation of Mineral Trioxide Aggregate and Biodentine™ as direct pulp capping agents in carious teeth (2017).